

Attention : Document révisable à tout moment, doit être comparé à la dernière version en cours sur le réseau informatique.

Historique du document

Version	Date	Rédacteur	Modifications
V0.0	06/12/11	R. MENNESSIER	Création
V1.1	02/12/13	R. MENNESSIER	
V2.0	29/03/17	S. PEREZ	Réactualisation des pratiques d'hygiène Intégration des pratiques de nettoyage et désinfection de chariot et bouteille de MEOPA après utilisation.
V3.1	29/08/17	C. LACOCHE	Application de la nouvelle Charte graphique et nouvelle procédure Gestion documentaire

Tableau de validation

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
S.PEREZ - CGRAS	L. DUTEILLE - RQPCM	CLIAS
29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017

1. Objet

Description des étapes de nettoyage et désinfection du matériel mis à disposition au domicile du patient.

2. Professionnels concernés

Les professionnels soignants qui participent aux soins auprès du patient.

3. Modalités

Le nettoyage et la désinfection des moyens logistiques mis en place au domicile du patient relèvent du travail des soignants.

Qui ?	Quand ?	Où ?	Quoi ?	Comment ?
Tous professionnels soignants	Avant, pendant et après la réalisation de tous soins	Le plan de travail et tout dispositif nécessaire aux soins	Sur le lieu de réalisation du soin	<p>Au préalable, mettre des gants à usage unique pour éviter tout contact avec le produit.</p> <p>Nettoyer et désinfecter le plan de travail à l'aide d'une lingette WIP'ANIOS (Cf. fiche d'utilisation à la fin de ce protocole).</p> <p>En cas de souillure importante, utiliser une seconde lingette sans oublier de laisser sécher entre les 2 passages.</p> <p>Le rinçage est inutile, le séchage permet d'obtenir la désinfection.</p> <p>Utiliser le cas échéant champ stériles, set de soin....</p> <p>Nettoyer et désinfecter les surfaces et objets utilisés durant le soin avec la lingette WIP'ANIOS.</p>

CAS PARTICULIERS

Tiroirs / Caisse de kit de PEC

AS IDEC	A la livraison hebdomadaire	Maintenir tiroirs/caisse propre	Dans la chambre du patient	Déposer au domicile des tiroirs ou caisse propre comprenant le kit de prise en charge.
---------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

Attention : Document révisable à tout moment, doit être comparé à la dernière version en cours sur le réseau informatique.

Qui ?	Quand ?	Où ?	Quoi ?	Comment ?
	des DM du stock HAD		DPA chevet	En cours de la prise en charge, procéder au nettoyage des tiroirs/caisse à minima une fois par mois et autant que de besoin en cas de souillures avec la lingette nettoyante / désinfectante. Tracer sur le diagramme de soins.
Lit médicalisé				
AS	Après les soins	Maintenir la literie propre		Solliciter, si besoin, l'entourage familial pour réaliser la réfection du lit. A minima une fois par semaine et autant que de besoin, assurer nettoyage et désinfection du lit et accessoires (barrières, potence, etc.) avec lingettes nettoyantes / désinfectantes Tracer sur le diagramme de soins.
Dispositifs médicaux liés à la continence (chaise percée, bassins, urinal)				
AS et autres intervenants	Après chaque utilisation	Maintenir l'hygiène des DM	Au domicile	Vider, rincer et nettoyer les accessoires avec produits ménagers habituels. Utiliser l'eau de javel diluée à 10% (Cf. PREPARATION ET UTILISATION DE L'EAU DE JAVEL à la fin de ce protocole) si contact avec produits sanguins et/ou risque infectieux identifié (BHRé, etc...)
Dispositifs médicaux liés à des soins spécifiques (concentrateurs d'O2, MEOPA, pompe et pousse seringue, pied à sérum...)				
AS	Une fois par semaine	Maintenir l'hygiène des DM	Dans la chambre du patient Dpa chevet	Assurer le nettoyage et désinfection des DM avec les lingettes WIP ANIOS. Bouteille de MEOPA : seul l'obus doit être nettoyé et désinfecté, pas de contact avec les connexions. Le chariot utilisé pour stabiliser la bouteille de MEOPA lors de son stockage au domicile ainsi que le tuyau évacuateur sont également nettoyés et désinfectés. Tracer sur le diagramme de soins.
A la sortie du patient de l'HAD				
AS IDE	Lors de la dernière intervention C	Dans la chambre du patient DPA chevet	Nettoyer le kit de PEC	Vider la caisse/tiroirs de DM : Si poursuite des soins : laisser au domicile les DM pour les soignants relais (IDEL, SSIAD). Si absence de soins : évacuer les DM dans les DASRI (cartons ou collecteur OPCT). Assurer nettoyage et désinfection de la caisse/tiroir DM avec la lingette nettoyante désinfectante avant de les rapporter à l'HAD. Tracer sur le diagramme de soins.

4. Evaluation

- Nombre de FSEI ;

Attention : Document révisable à tout moment, doit être comparé à la dernière version en cours sur le réseau informatique.

- Taux d'infections nosocomiales ;
- Audits.

5. Références

- Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 de l'exercice infirmier.


ETIQUETTE DE LINGETTES NETTOYANTES DESINFECTANTES



PREPARATION ET UTILISATION DE L'EAU DE JAVEL

PRÉSENTATION

- Eau de Javel à 2,6 % de chlore actif prêt à l'emploi (présentation à privilégier).
- Concentré d'eau de Javel 250 ml à 9,6 % de chlore actif qui ne doit jamais être utilisé en l'état (berlingot). Il doit être dilué avec 750 ml d'eau froide dans un flacon de 1 litre, opaque et convenablement étiqueté.

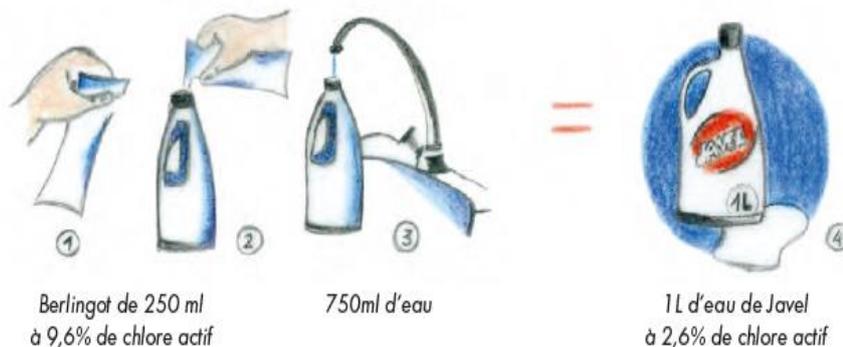

Attention : Document révisable à tout moment, doit être comparé à la dernière version en cours sur le réseau informatique.



Les comprimés (pastilles) ou poudre de « Javel » sont du dichloroisocyanurate de sodium. Il est impératif de connaître la concentration de chlore actif contenue dans un comprimé, or celle-ci n'est pas maîtrisée. **Par conséquent, cette présentation ne correspond pas aux critères de désinfection des surfaces, des dispositifs médicaux ni des locaux et ne doit pas être retenue.**

UTILISATION

Pré-désinfection, en présence de souillures (**0,5 % de chlore actif**). Ex : précautions standard, *Clostridium difficile* et certains virus (norovirus) :

- 1 litre d'eau de Javel à 2,6 % chlore actif + 4 litres d'eau froide ;
- temps de contact 15 min.

Désinfection en condition de propreté des sols, surfaces, matériel et robinetterie (**0,1% de chlore actif**) :

- 200 ml d'eau de Javel à 2,6 % chlore actif + 4800 ml d'eau froide ;
- temps de contact 15 min.

CONSERVATION

- L'eau de Javel à 2,6 % de chlore actif, dans le conditionnement d'origine : 3 ans à l'abri de l'air, de la lumière et de la chaleur ($T^{\circ} < 20^{\circ}C$).
- Le concentré d'eau de Javel à 9,6 % de chlore actif (berlingot, extrait) à l'abri de la chaleur et de la lumière :
 - 3 mois après la date de fabrication, en période froide ;
 - 2 ½ mois après la date de fabrication, en période chaude.
- **Toutes les dilutions d'eau de Javel autres que celle prête à l'emploi à 2,6 % doivent être utilisées au maximum dans les 24 heures.**